


Kombibolus – del din bolusdosis op

Hvad er en kombibolus?

Det er en bolusfunktion hvor du "deler" bolusdosen i to trin – en normal og en forlænget del. Den kan anvendes ved mange måltider, men specielt kulhydrat- og fettrige måltider som f.eks. pizza.

Hvordan fungerer kombibolus?

Den hjælper dig med at efterligne kroppens egen insulin-udskillelse med sigte på at mindske blodsukker-svingningerne efter et måltid.

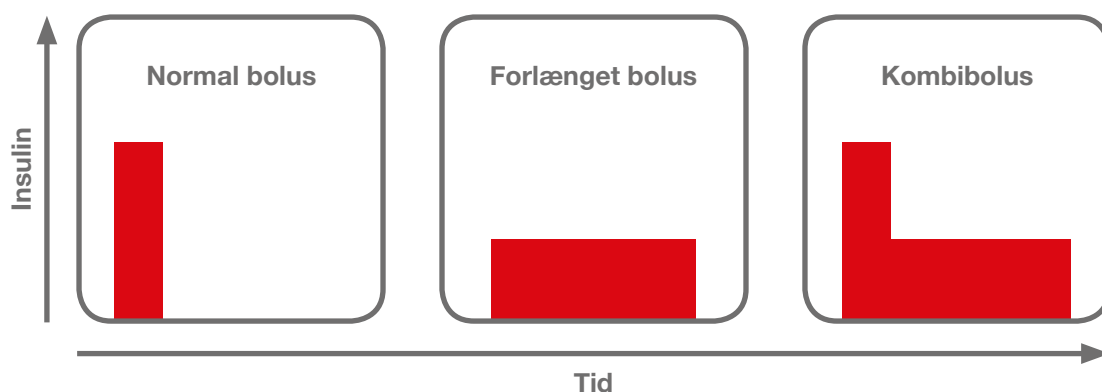

DK-1057-141111

Kombibolus – del din bolusdosis op

Forskellige forslag til fordeling:

Måltid	Fordeling	Tid
	Normal : Forlænget	
Pizza, lasagne m.m.	50 % : 50 %	2 – 6 tim
Småpisser	0 % : 100 %	30 min – ? tim

Programmering i pumpen

Under ezCarb indtastes mængden af kulhydrat og hvis du ønsker det, dit aktuelle blodsukker. Herefter trykkes OK til "Vis resultat". Tryk én gang på PIL OP for at overføre den foreslåede totale dosis (denne dosis kan om nødvendigt justeres med PIL OP eller PIL NED). Tryk herefter én gang på OK, hvorefter "OK" fremhæves. Ønsker du at opdele insulindosis, rul med PIL NED til feltet "TYPE". Tryk OK og vælg kombibolus. Herefter kan du indtaste din ønskede "opdeling" af normal i forhold til forlænget insulindosis samt den varighed, der passer dig bedst.

Du kan når som helst afbryde den pågående forlængede del af kombibolusen.

Det er altid en rigtig god ide, at evaluere ændringer i insulindoserne med ekstra blodsuktermålinger.

